


多功能干燥教学单元操作中试装置

货号: LPK-BMFD

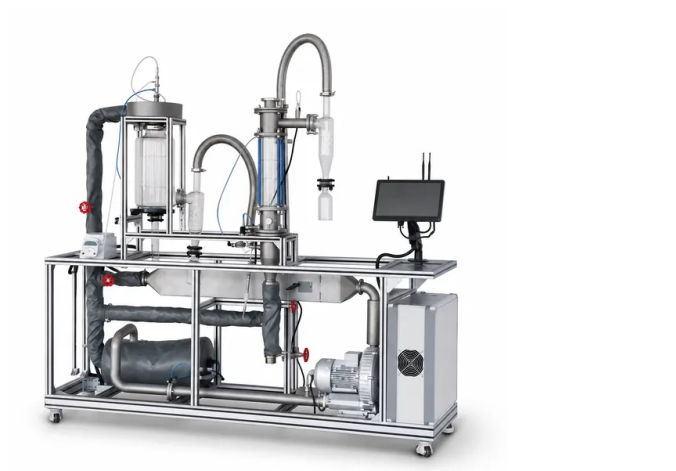

简介

集隧道、流化床和喷雾干燥于一体的多功能干燥教学单元操作中试装置。支持在高等教育实验室的化学工程课程中，对干燥曲线、湿度测量学及气固分离进行实践性研究。

[了解更多](#)

系统参数 / 模块	技术描述与能力
干燥模式	隧道干燥、流化床干燥和喷雾干燥
可视化组件	透明喷雾干燥塔、流化床柱和旋风分离器
机架构造	带锁定脚轮的高强度工业铝合金框架
设备占地面积	最大尺寸 2200 mm × 580 mm × 1980 mm (长 × 宽 × 高)
仪器仪表与传感器	集成干/湿球温度传感器、风速计和电子天平指示器
核心实验练习	- 干燥曲线和干燥速率曲线的测定 - 空气湿度的湿度测量 - 静态与流化状态下干燥动力学的比较研究 - 雾化动力学和旋风分离器中气固分离的可视化分析